

		B21STFX	B21STMX
1	CHC screw M10 L60	V02I-1060	V24I-10
2	Lock washer Ø 10	V24I-10	V24I-10
3	Flat washer Ø 10	V20I-102219	V20Z-102219

Restriction on use / Precautions for use

Tightening torques (use key (Ref. : ZOC102))

Screw	Torques (Nm)
V02Z-1060	25
V02I-1060	25

- Assemble the screws using normal (Ref. : Z31-243) locking compound
- The product must be used within the recommended weight limits and in accordance with the assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the patient concerned
- Product maintenance is subject to an assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the conditions of use
- All assembly and adjustment work must be carried out by qualified personnel

Cleaning / Storage

- Stock the product in a dry place, in its original packing (on which the batch number is marked)
- The frequency of inspections to check the equipment is subject to the assessment made by the ortho-prosthetist depending on the patient concerned

Guarantee

The guarantee is valid for one year as from the date of purchase of the product, if the product has been used in accordance with the manufacturer's instructions.

N.B. In the event of a complaint, please enclose a return form correctly filled in, incomplete forms cannot be dealt with.

EC markings

Groupe G2M hereby declares, in its quality as the manufacturer, that all its parts comply with directive 93/42/EC.



B21STFX/STMX



Désignation

Adaptateur malléolaire avec pyramide - Vis M10

- B21STFX : Alliage léger Poids : 105 g
- B21STMX : Acier inoxydable Poids : 135 g


Destination


Élément de structure entrant dans la fabrication de prothèses endosquelettiques du membre inférieur

- B21STFX : Limite de poids : 100 kg
- B21STMX : Testé ISO 10328 P6 136 kg

Mise en place

Alignements théoriques

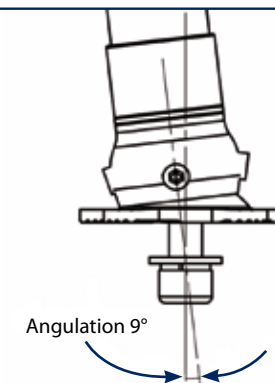

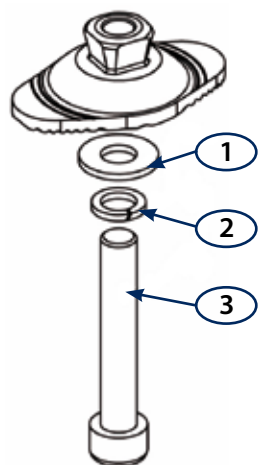

		B21STFX	B21STMX
1	Vis CHC M10 L60	V02I-1060	V24I-10
2	Rondelle grower Ø 10	V24I-10	V24I-10
3	Rondelle plate Ø 10	V20I-102219	V20Z-102219

Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

Couple de serrage (utiliser la clé dynamométrique (Réf. : ZOC102))

Vis	Couple (Nm)
V02Z-1060	25
V02I-1060	25

- ⤵ Monter les vis avec du frein filet normal (Réf. : Z31-243)
- ⤵ L'adaptateur doit être utilisé dans les limites de poids conseillées et suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- ⤵ La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- ⤵ L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

Entretien / Stockage

- ⤵ Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- ⤵ La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.

B21STFX/STMX



Designation

Malleolar adapter with pyramid

- ⤵ B21STFX : Light alloy Weight : 105 g
- ⤵ B21STMX : Stainless steel Weight : 135 g

Purpose

Structural element used to make endoskeletal prostheses of the lower limbs

- ⤵ B21STFX : Weight limit : 100 kg
- ⤵ B21STMX : Tested in accordance with ISO 10328 P6 136 kg

Fitting

Theoretical alignments

